

Gyógylézer Család Kft.

orvosi lézerek gyártása és forgalmazása, javítás, felülvizsgálat

1117 Budapest, Budafoki út 183.

06-1/203-0001; (+36) 70/679/8810

ugyfelszolgalat@gyogylezer.hu

www.gyogylezer.hu; www.softlaser.hu

Cg.01-09-995213

KLASSZIKUS NAGYTELJESÍTMÉNYŰ ASZTALI KÉSZLET

- OPTIKOP BEAUTY CLASSIC 150V-100BL-1700LZ Asztali Lágylézer Vezérlőegység
- 3 típusú kezelőfej
- 3 féle masszázsfaj
- 2 db védőszemüveg

A csomag ára: Bruttó 3.040.000.-Ft

A lágylézer-kezelés, bármely kozmetikai protokollba beépíthető!

A KLASSZIKUS NAGYTELJESÍTMÉNYŰ ASZTALI KÉSZLET részei:

1. Optikop Classic vezérlő és tápegység

- ❖ Egyszerűen kezelhető, tekerőgombos asztali vezérlőegység
- ❖ A vezérlőegységhez összesen három különböző kezelőfej csatlakoztatható: egy piros és egy ibolya pontkezelőfej, valamint egy lézerezuhany.
- ❖ A dózis kiválasztása után (ami lehet 2,4,6,8,10 és végtelen Joule) a készülék automatikusan beállítja a kezelési időt és jelzi annak múlását.
- ❖ A készülék biztonságos használatát az integrált teljesítményellenőrzés és a kezelőfejek hőmérséklet-figyelése garantálja, ennek következtében működése stabil és megbízható.
- ❖ Akupunktúrás kezeléshez 7 féle Moduláció kiválasztásra van lehetőség

Az „ÖRÖK KLASSZIKUS” OPTIKOP asztali lágylézer kezelőrendszer, könnyen átlátható kezelőfelülettel!

Vezérlő egy, kettő, három kezelőfejhez

1



2



Piros kezelőfej
(dióda: 150 mW)

3



Ibolya kezelőfej
(1 dióda: 100 mW)

4



Infra lézerezuhany
(6 dióda: 1700 mW)

2. Optikop Beauty Classic F 150V: piros lágylézerfényt sugárzó kezelőfej**A piros lágylézerfény a hám-irha szöveiteiben fejt ki hatását:**

- ❖ Sejtregeneráló, sejtmeújító, fokozza a sejtek energiatermelését, javítja a sejtek oxigén ellátását
- ❖ Szövetregeneráló, kollagéntermelést stimuláló
- ❖ Javítja a sejtek anyagcsere folyamatait
- ❖ Csökkenti a gyulladásokat, szöveti pangásokat, ödémákat

Használata javasolt: szeborreás-, aknés-, fényt veszített, fáradt-, öregedő bőrre, szarkalábak-, ráncok simítására, bőr életerejének fokozására, szem alatti sötét karikák kezelésére, gyulladáscsökkentésre, kozmetikai tisztító kezelés nyomainak gyorsabb regenerálódására, aknék nyomában keletkező hegek kialakulásának megakadályozására és gyógyítására, baleseti-, műtéti seb- és heg kezelésre.

Tájékoztató jellegű kezelési idő: 2 Joule (J) leadása 15 másodperc; 4 J leadása 30 másodperc

3. Optikop Beauty Classic F-100BL: ibolya lágylézerfényt sugárzó kezelőfej**Ibolya lágylézerfény a hám rétegében fejt ki hatásait:**

- ❖ Cutibacterium acne (korábban: propioni bacterium acne) számának csökkentése
- ❖ Faggyútermelés szabályozása, szaruképzés normalizálása

Használata javasolt: akne, gyulladt comedók, szeborreás bőr, Optikop Beautylaser Balancing kezelés

Tájékoztató jellegű kezelési idő: 3 J leadása 33 másodperc

4. Optikop Beauty Lézerzuhany 1700 IR: infra lágylézerfényt sugárzó, 10 cm² felületet lefedő lézerzuhany**Infra lézerzuhany a hám-irha-bőralja szöveiteiben fejt ki hatását:**

- ❖ Azonnal látható Face-Lifting hatás
- ❖ Sejtregeneráló, sejtmeújító, fokozza a sejtek energiatermelését, javítja a sejtek oxigén ellátását
- ❖ Szövetregeneráló, kollagéntermelést stimuláló, feszesítő
- ❖ Javítja a sejtek anyagcsere folyamatait
- ❖ Csökkenti a gyulladásokat
- ❖ Javítja (regenerálja) az izmok állapotát, segíti a hatóanyagok bejutását a mélyebb szövetekbe

Használata javasolt: Optikop Beautylaser SlowAging kezeléshez

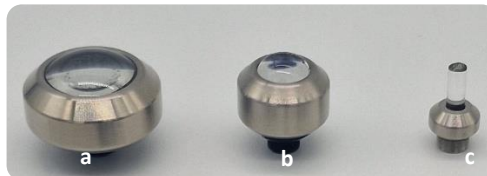
Face-lifting, Anti-Aging, kezeléshez, megereszkedett, rugalmasságát veszített, heges bőrre. Nagyobb felületek, nyak és dekoltázs kezelésére, mélyebben fekvő izmok, izomcsoportok kezelésére.

Tájékoztató jellegű kezelési idő: arc és dekoltázs kezelése 20-25 perc

4. Masszázsfej csomag:

- ❖ **Nyak- és dekoltázskezelő (a) + arc- és ránckezelő masszászfejek (b) + 1 adapter:** a két különböző méretnek köszönhetően a nagyobb és a kisebb felületek is elérhetővé válnak, így a dekoltázs és nyak, valamint az arc, homlok területei is kényelmesen kezelhetők, a kontakt, masszázs-jellegű kezelés fokozza a vendég-élményt!

- ❖ **Szemránck kezelő (c):** ezzel az optikai feltéttel a szemkörnyéki ráncok, szarkalábak lágylézer-kezelése válik könnyen kivitelezhetővé.


6. Védőeszközök:


- ❖ Szemüvegre is felhelyezhető **triplán kombinált védőszemüveg** a **kezelő részére:** ibolya, piros és infra fényhez

- ❖ Szemvédő arckezeléshez, a **paciens részére**


7. További tartozékok:

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| ❖ 1 db „Lágylézer terápia” szakkönyv | ❖ 1 db akne-kezelő feltét |
| ❖ 1 db csatolókép | ❖ 1 db hord-táska |
| ❖ 1 db száloptika | ❖ 1 db figyelmeztető címke |
| ❖ 1 db kontakt feltét | ❖ 1 db kezelési utasítás |
| ❖ 1 db távtartó lézержuhanyhoz | ❖ 1 db adapter |
| | ❖ 1 db tálca |

ÜZLETI ELŐNYÖK

- ❖ gyorsan megtérülő beruházás
- ❖ nincs fenntartási költség
- ❖ marketing támogatás
- ❖ 24 hónap garancia
- ❖ részletfizetési lehetőség

SZAKMAI TÁMOGATÁS

- ❖ ingyenes készülékbemutató
- ❖ ingyenes készülékbemutató
- ❖ komplex képzési rendszer
- ❖ folyamatos továbbképzések
- ❖ ingyenes rendszeres konzultáció
- ❖ hazai gyártó, elérhető szervíz szolgáltatás

Légy részese az OPTIKOP Beautylaser közösségnek!

www.beautylaser.hu